


ENTRIEGELUNGSVORRICHTUNG 1M01100

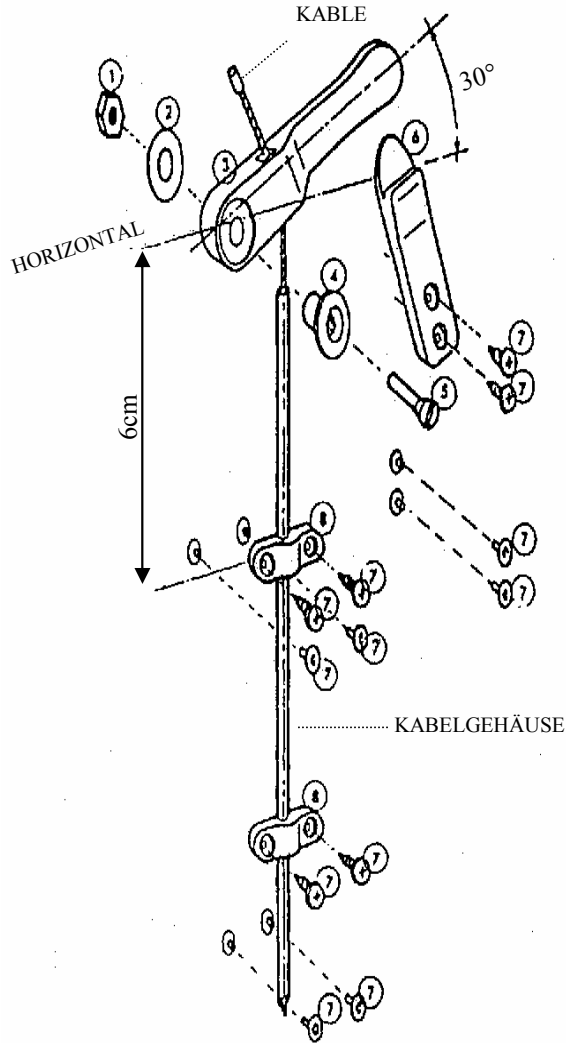

- Die Gewindemutter 1 auf den Prothesenschaft aufarbeiten.

- Die Scheibe 2, die Entriegelungs-vorrichtung 3 und den Ring 4 mit der Schraube 5 zusammensetzen.


- Das Kabelgehäuse auf die richtige Länge schneiden.

- Das Kabel in die Aufnahme der Entriegelungsvorrichtung 3 einführen. Das Kabegehäuse über das Kabel schieben. Das Kabel am Feststellungshebel des Kniegelenks unter der gewünschten Spannung befestigen. In der verriegelten Lage ist die Entriegelungsvorrichtung ca. 30° über der Horizontalen geneigt.

- Mit Schrauben oder Nieten 7 ein oder zwei Kabelhalter 8 befestigen.

- Den Entriegelungsmechanismus 6 mit Schrauben oder Nieten 7 befestigen.

LOCK CONTROL KIT 1M 01100

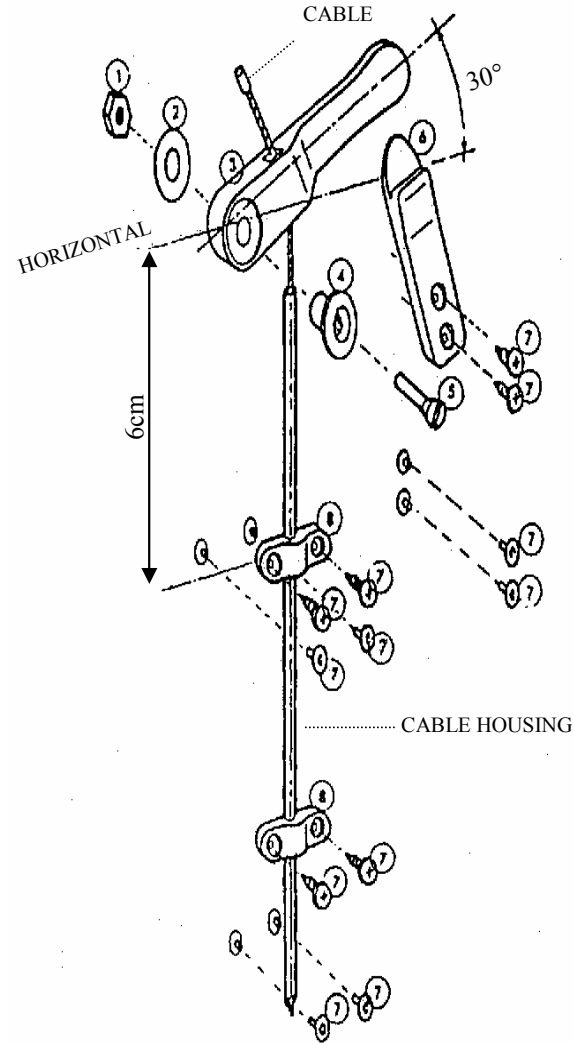

- Insert hex nut 1 in wooden or laminated socket wall.

- Assemble washer 2, handle 3 and bushing 4 using screw 5.

- Cut "cable housing" at required length.


- Insert cable in handle 3 hole, cable housing and attach it to lock lever with desired tension. It is convenient to have handle adjusted 30° decline of horizontal line when locked.

- Place one or two cable housing anchors 8 using screws or speedy rivets 7.

- If necessary, place handle retainer 6 using screws or speedy rivets 7.

SYSTEME DE DEVERROUILLAGE

1M 01100

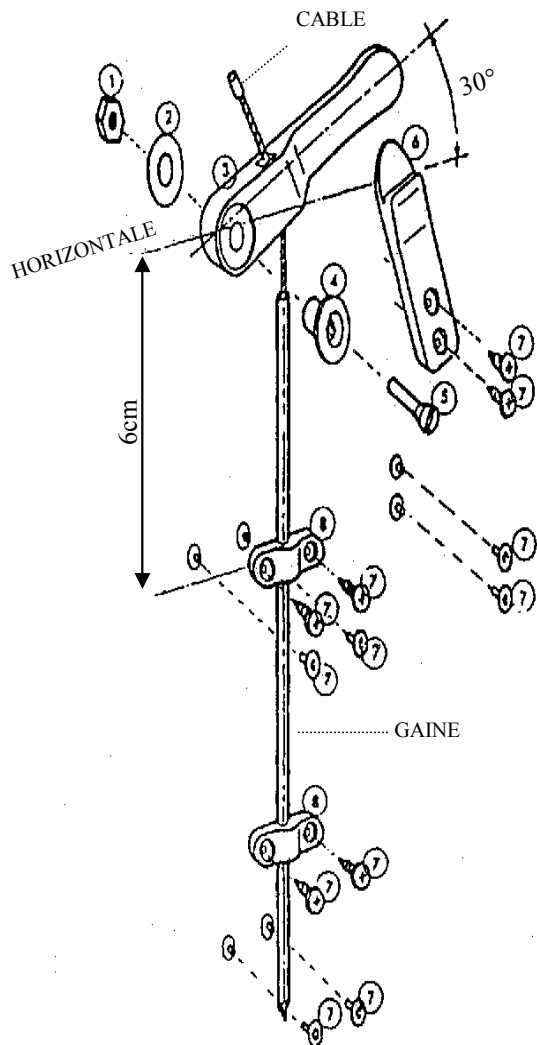

- Inclure l'insert taraudé 1 dans le bois ou le stratifié.

- Assembler la rondelle 2, la manette 3 et la bague 4 avec la vis 5.

- Couper la gaine à la dimension voulue. Insérer le câble dans le trou de la manette 3, dans la gaine et le fixer au levier du verrou avec la tension désirée.


La manette sera inclinée de 30° environ au-dessus de l'horizontale en position verrouillée.

- Mettre en place un ou deux pontets 8 à l'aide des vis ou des rivets tubulaires 7.

- Eventuellement fixer la languette 6 de maintien du déverrouillage à l'aide des vis ou des rivets tubulaires 7.

SISTEMA DE DESBLOQUEADO

1M01100

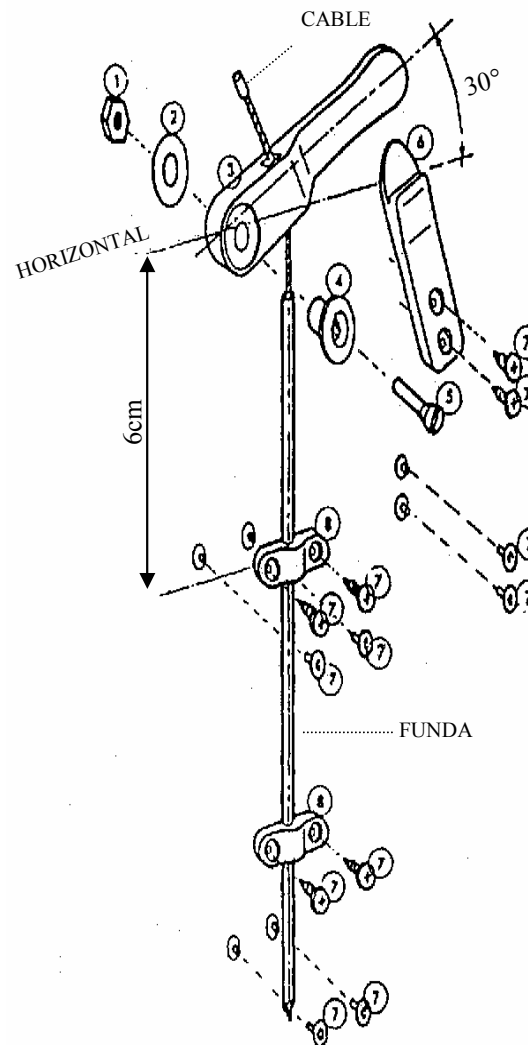

- Incluir la cuña de tacón 1 en la madera estratificada.

- Unir la rodaja 2, la manecilla 3 y el anillo 4 con el tornillo 5.

- Cortar la funda al tamaño requerido.

- Incorporar el cable en el orificio de la manecilla 3, en la funda, y fijarlo al mando del pasador con la tensión requerida. La manecilla estará inclinada de 30° más o menos arriba del horizontal en posición bloqueada.

- Colocar una o dos grapas 8 merced a tornillos o roblones tubulares 7.

- Eventualmente fijar la lengüeta 6 de mantenimiento de desbloqueo con unos tornillos o roblones tubulares 7.